

STARMed CaStar Up

Casco apribile per terapia CPAP



STARMed CaStar Up – casco apribile per CPAP

StarMed CaStar Up

Il casco apribile CaStar Up è un dispositivo raccomandato per le insufficienze respiratorie:


- Edema polmonare cardiogenico
- Edema polmonare non-cardiogenico (ALI-ARDS)
- Trauma toracico
- Atelectasia
- Ipossiemia post-operatoria
- Asma
- BPCO riacutizzato
- Assistenza respiratoria pre e post-estubazione

Benefici

- Permette un rapido accesso al viso del paziente durante le operazioni infermieristiche e in caso di emergenza
- Un solo operatore può facilmente rimuovere la parte superiore del casco e avere completo accesso al paziente
- Sonde e cateteri possono rimanere in sede sul paziente solidali alla parte inferiore del casco
- Ben tollerato anche per periodi prolungati
- Previene il rischio di decubiti da maschera facciale

Caratteristiche tecniche

- Connettori 22M/22F secondo gli standard ISO
- Provvisto di manometro integrato per verificare la presenza di pressione all'interno del casco
- Volume interno 15 litri - peso 690gr
- Bretelle ascellari atraumatiche regolabili con velcro
- Accessori di fissaggio alternativi sono disponibili su richiesta
- Nuovi accessi di dimensioni più ampie sul collare per sonde o cateteri di 3.5-7.0mm Ø
- Oblò di accesso al paziente con chiusura a vite. Valvola antisofoffocamento bidirezionale ad apertura automatica in mancanza di pressione
- La tenuta ermetica del sistema è assicurata da una membrana elastica che non aderisce al collo, ma alla parte superiore del tronco del paziente, quando il casco è gonfio
- Ulteriori modelli disponibili con cuscino gonfiabile integrato o senza oblò di accesso al paziente

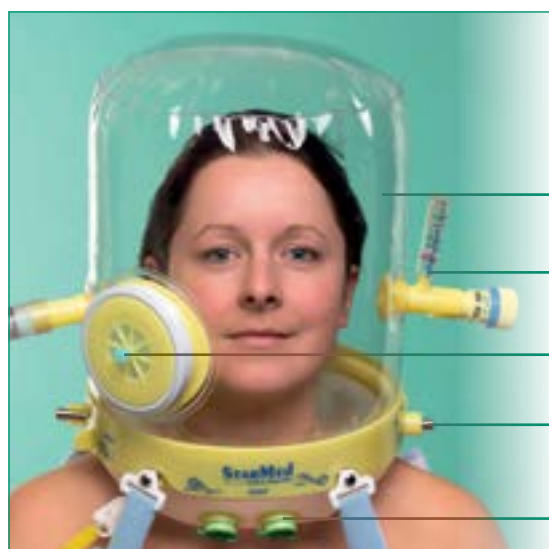

Caratteristiche e benefici



Prodotto certificato CE

Trasparente

Per un facile monitoraggio del paziente

Manometro integrato

Oblò di accesso al paziente con valvola antisofoffocamento bidirezionale

Rimozione facile per un rapido accesso al paziente

Nuovi accessi di ampie dimensioni sul collare

Ideali per sonde e cateteri mono e multi lume

CaStar Up casco apribile per CPAP con valvola antisofoffocamento bidirezionale e oblò di accesso al paziente

Codice	Misura	Circonferenza collo	Q.tà per scatola
CA011XXL/2	Extra Extra Large	≥50cm	5
CA011XL/2	Extra Large	45-52cm	5
CA011L/2	Large	40-47cm	5
CA011M/2	Medium	34-41cm	5
CA011S/2	Small	27-34cm	5
CA011XS/2	Extra Small	17-27cm	5

Confezionati singolarmente. Confezione multipla da 5 pezzi. Custom pack sono disponibili su specifica richiesta del cliente.

IS1.31_IT Issue2 01.14