

# STARMed CaStar R Up

Casco apribile per ventilazione meccanica non invasiva (NIV)



# STARMed Castar R Up - casco apribile per NIV

## StarMed Castar R Up

Il casco apribile Castar R Up è un dispositivo raccomandato per il trattamento delle insufficienze respiratorie, tra cui:


- Edema polmonare cardiogenico
- Edema polmonare non-cardiogenico (ALI-ARDS)
- Trauma toracico
- Atelectasia
- Ipossipemia post-operatoria
- Asma
- BPCO riacutizzato
- Assistenza respiratoria pre e post-estubazione

## Benefici

- Permette un rapido accesso al viso del paziente durante le operazioni infermieristiche e in caso di emergenza
- Un solo operatore può facilmente rimuovere la parte superiore del casco e avere completo accesso al paziente
- Sonde e cateteri possono rimanere in sede sul paziente solidali alla parte inferiore del casco
- Ben tollerato anche per periodi prolungati
- Previene il rischio di decubiti da maschera facciale

## Caratteristiche tecniche

- Connettori 22M secondo gli standard ISO
- Volume interno 12 litri - peso 680 gr
- Bretelle ascellari atraumatiche regolabili con velcro
- Accessori di fissaggio alternativi sono disponibili su richiesta
- Nuovi accessi di dimensioni più ampie sul collare per sonde o cateteri di 3.5 - 7.0mm Ø
- Oblò di accesso al paziente con chiusura a vite. Valvola antisoffocamento bidirezionale ad apertura automatica in mancanza di pressione
- La tenuta ermetica del sistema è assicurata da una membrana elastica che non aderisce al collo, ma alla parte superiore del tronco del paziente, quando il casco è gonfio
- Ulteriori modelli disponibili con cuscino gonfiabile integrato o senza oblò di accesso al paziente

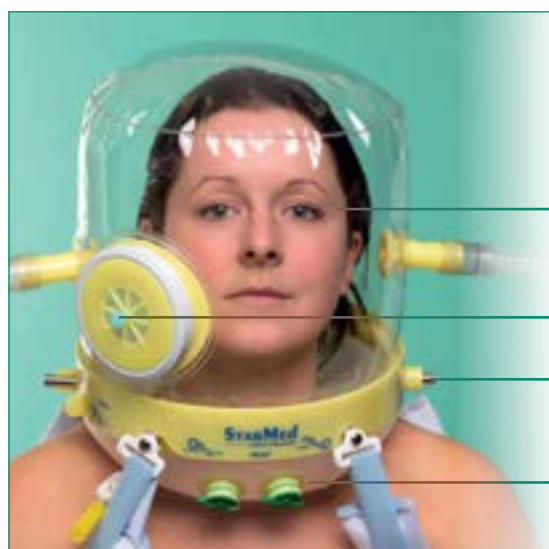

## Caratteristiche e benefici



Prodotto certificato CE

### Trasparente

Per un facile monitoraggio del paziente

**Oblò di accesso al paziente con valvola antisoffocamento bidirezionale**  
**Rimozione facile per un rapido accesso al paziente**

### Nuovi accessi di ampie dimensioni sul collare

Ideali per sonde e cateteri mono e multi lume

Castar R Up casco apribile per NIV con valvola antisoffocamento bidirezionale e oblò di accesso al paziente

Codice	Misura	Circonferenza collo	Q.tà per scatola
CA021XXL/2R	Extra Extra Large	≥50cm	5
CA021XL/2R	Extra Large	45-52cm	5
CA021L/2R	Large	40-47cm	5
CA021M/2R	Medium	34-41 cm	5
CA021S/2R	Small	27-34cm	5
CA021XS/2R	Extra Small	17-27cm	5

Confezionati singolarmente. Confezione multipla da 5 pezzi. Custom pack sono disponibili su specifica richiesta del cliente.

IS1.39\_IT • Issue 1\_01.14